

Si la goutte ne semble pas assez grosse, je masse léaèrement le doigt, de sa base vers son extrêmité, ou le pied, des orteils vers le talon.



Je laisse la ou les gouttes de sang sécher à l'air libre.





Je dépose en une seule fois une grosse goutte de sang dans un cercle du papier buvard ...






Une fois sec, i'envoie le iour même, le buvard et l'ordonnance dans une enveloppe, se-Ion les indications de mon équipe soignante.



18

... et si cela m'a été demandé par mon équipe soignante, je répète cette opération dans un second cercle.

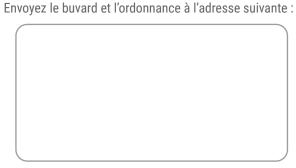

19

Pour que le prélèvement soit correct, je vérifie que la ou les taches de sang remplissent bien le cercle ...



En respectant la conformité du prélèvement, je contribue au bon suivi de mon enfant.

Vous souhaitez que la filière aide votre enfant ou vous-même pour mieux comprendre la maladie?






20

... et qu'elles apparaissent bien à l'envers du buvard.





www.filiere-g2m.fr

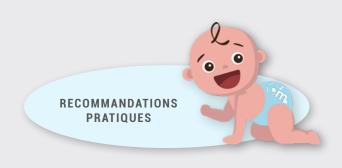


## Faire un prélèvement sur papier buvard





Je choisis le moment du prélèvement.

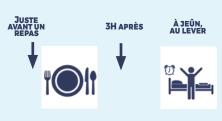







Pour un bébé. je peux faire le prélèvement soit sur un doigt, soit au talon.

6



Pour un prélèvement au doigt, j'évite de choisir le pouce et l'index et de piquer la pulpe.

13





2 Avant de commencer, je réunis le matériel nécessaire : 1 buvard, 1 autopiqueur ou 1 lancette\* et l'ordonnance\*\*.








Avant de piquer, je peux masser le doigt ou le talon puis je prends l'autopiqueur et je l'enclenche.

12



Je vérifie que l'ordonnance date bien de moins de 1 an et que la date de péremption du buvard n'est pas passée.

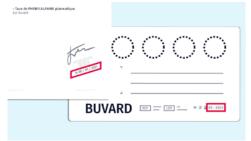



8 Je me lave les mains puis je nettoie soigneusement les mains ou les pieds de mon enfant avec de l'eau chaude et du savon.





Je note sur l'ordonnance et le buvard la date et l'heure du prélèvement ou

je l'écris.





J'appuie pour déclencher la piqûre.

14



Je colle sur l'ordonnance et le buvard l'étiquette avec le nom et le prénom de mon enfant ou je les écris.






10 Pour un prélèvement au talon, je peux installer mon bébé sur une table à langer, allongé sur le côté, son dos vers moi.



Je vérifie qu'une grosse goutte de sang se forme à l'endroit de la piqûre.

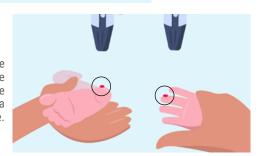

\*: une lancette permet d'obtenir plus facilement une grosse goutte de sang qu'un stylo autopiqueur

\*\* : examen biologique soumis à la réglementation du code de la santé publique (Article L6211-1 Modifié par LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 4 et Article L6211-8 Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 94 (V))